

OOO НТЦ "Петролазер" www.petrolaser.ru


Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

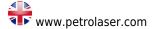

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000



ЦЕНА

по запросу


Категории:

Оборудование для пробоподготовки Гомогенизаторы лабораторные Лабораторное оборудование пробоподготовки для ветеринарных клиник Оборудование для ветеринарных клиник Оборудование для пробоподготовки



Описание

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000 — предназначен для получения

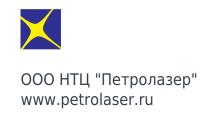


Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru YouTube г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

Россия, 198099,

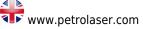

однородных, мелко измельчённых смесей, а также эмульсий с высокой дисперсностью в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований. Чтобы купить гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту. Предлагаем также ознакомиться с обзором гомогенизаторов ГЛП.

Назначение

Эмульсификация смесей жиров, гомогенизация растворов и смесей жидкостей в целях получения репрезентативного образца.

Особенности

Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10 000 отвечает требованиям ГОСТов: — **ГОСТ 31976-2012**. Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности — **ГОСТ 33926-2016**. Продукты молочные составные и молокосодержащие. Мороженое и смеси для мороженого. Определение массовой доли жира методом Вейбулла-Бернтропа.

Рабочий орган — ротор, может быть снабжен ножом с двумя или четырьмя областями. Нож изготовлен с такой геометрией, которая обеспечивает вихреобразование и подачу материала в зону измельчения.

Наличие полипропиленовой крышки с канавками препятствует разбрызгиванию образца, и позволяет работать с емкостями различного объема.

П- образный выступ на крышке ориентирует ее относительно стойки аппарата.

Характеристики

| Максимальная скорость вращения | 10 000 об/мин |
|-----------------------------------|---------------|
| Мощность двигателя не менее | 400Вт |




Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

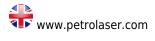

| Диапазон установки таймера | 1 — 10 мин (с шагом 1 мин) |
|--|----------------------------|
| Рабочая емкость | нержавеющая сталь |
| Максимальный объем гомогенизируемого образца | до 1 л * |
| Электропитание | 220В/50Гц |
| Габаритные размеры | 580x290x220 мм |
| Масса | 7,5 кг |

^{*} В базовой комплектации прибор оснащен тремя емкостями на 0.25 л., 0.5 л и 1л. По дополнительной заявке прибор может быть укомплектован и другими емкостями до 1.0 л.