



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


Накладка для образцов мяса

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез

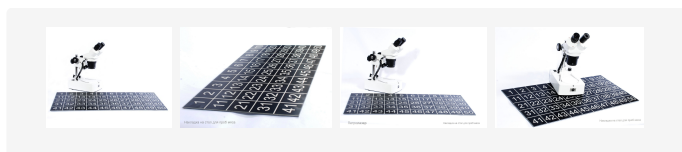

Описание

Накладка на лабораторный стол, для образцов мяса позволяет идентификацию проб по тушам, во время исследования на трихинеллез. Материал — оксидированный алюминий (стойкий окисел Al_2O_3), основа — композит.

Используется как при методе компрессорной трихинелоскопии, так и лабораториям мясокомбинатов, использующими метод переваривания проб в искусственном желудочном соке.

При компрессорном методе образцы, оставленные в соответствующих квадратах, могут быть, при возникновении сомнений в правильности результата, легко подвергнуты повторному исследованию.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

При использовании метода переваривания в ИЖС групповой пробы — такое приспособление при обнаружении трихинеллы в осадке позволит, как предусмотрено методикой, провести переваривание половины из взятых проб, а затем, последовательно уменьшая вдвое количество проб при каждой «варке», выявить ту тушу, которая инвазирована трихинеллами.

Характеристики

Размеры — 700 x 350 x 4 мм Размер одного поля — 70 x 70 мм Материал-анодированный алюминий Основы — композит (трехслойный) . Способ нанесения графики — металлофото Вес, не более 1.8 кг