


OOO НТЦ "Петролазер" www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru YouTube Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

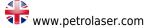

БАЛС-27-M2 баня лабораторная глубокая



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Бани водяные



Описание

Баня лабораторная БАЛС-27-М2 предназначена для нагрева образцов в пробирках, колбах и другой посуде в лабораториях различной специализации. Конструкция бани позволяет устанавливать 2 штатива Флоринского по 100 пробирок каждый. Наличие циркуляции теплоносителя гарантирует быстрый выход на режим и равномерность теплового поля. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить лабораторную баню по цене производителя.




Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

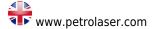

Назначение

Подогрев образцов, стабильное поддержание температуры проб при проведении разнообразных лабораторных исследований.

Особенности

- Корпус бани имеет термоизоляцию с низким коэффициентом теплопроводности, покрыт порошковой краской, устойчивой к механическим и химическим воздействиям.
- Индикация текущей и предустановленной температуры.
- Встроенный таймер (температура поддерживается заданное таймером время, после нагрев отключается).
- Блок управления выполнен по схеме PID-контроллера.
- Нагревательный элемент снабжен датчиком уровня воды и перегрева.
- Для обеспечения долгого срока эксплуатации используется анодная защита ванны.
- Крышка бани может использоваться как подставка для штативов или лабораторной посуды.
- Водяной циркуляционный насос, а также панель пола с перфорацией обеспечивают равномерный нагрев жидкости по всему объему.
- В комплекте два штатива Флоринского на 100 пробирок каждый.
- Может работать непрерывно в режиме 24*7

Характеристики

Предел регулирования температуры (°C)	от комнатной + 5 до 100°C
Точность поддержания температуры при номинальном объеме жидкости (°C), не более	±0,5
Неравномерность прогрева в ванной (°С), не более	±1,0
Дискретность установки температуры (°C)	0,1
Масса аппарата без жидкости (кг), не более	15
Габаритные размеры (мм)	370 × 650 × 330
Внутренние размеры ванны (мм)	300 × 490× 150




Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

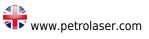

Рабочая жидкость	Вода дистиллированная
Максимальный объем рабочей жидкости (л)	21
Напряжение питающей сети (В)	220 ±22
Частота питающей сети (Гц)	50
Потребляемая мощность (Вт), не более	2000
Вместимость	2 штатива Флоринского по 100 пробирок каждый