
OOO НТЦ "Петролазер" www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru YouTube Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

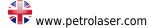

СИНУС 03 — Термо шейкер; баня со встряхиванием штативов



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Бани водяные



Назначение

Баня со встряхиванием «СИНУС 03» предназначена для подготовки проб посредством термостатированного нагрева в водяной бане на заданное время и встряхиванием (перемешиванием) с заданной частотой (например — при инкубации, гибридизации и т. д.). Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить лабораторную баню по цене производителя.

Особенности

Баня с качающимся ложементом «СИНУС 03» может быть так же использована для




Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

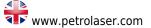

размораживания компонентов крови в специальных держателях, а так же на специальную платформу (изготовляется по дополнительному заказу) могут быть установлены колбы, держатели пакетов, или два <u>штатива Флоринского.</u>

- Резервуар бани и внутренние элементы изготовлены из нержавеющей стали;
- Микропроцессорный контроллер с влагозащищенным управлением;
- Дисплей индикации установленных/фактических параметров;
- Встроенный циркуляционный насос, обеспечивающий быстрое и равномерное нагревание по всему рабочему объему ванны;
- Звуковая сигнализация аварий/завершения работы;
- Вывод данных на периферийные устройства по каналу RS-232.
- Прозрачная крышка ванны;
- Датчик отключения при минимальном уровне воды.
- Плавный пуск качания;
- В комплекте поставки штатив для пробирок 4 шт.

Характеристики

Предел регулирования температуры (°C)	+5 до +99
Погрешность поддержания температуры (°C), не более	±0,5
Неравномерность прогрева в ванной (°С), не более	±1,5
Время нагрева рабочей жидкости объемом 22 л от температуры +15°C до +40° (мин), не более	30
Диапазон установки таймера, (мин:)	1 — 999
Амплитуда перемещений ложемента, (мм)	до 20
Частота колебаний ложемента в минуту	20-200
Масса аппарата без жидкости (кг), не более	22
Внутренние размеры ванны, (мм)	500x300x180
Габаритные размеры (мм)	710x350x260
Потребляемая мощность (Вт), не более	2300
Максимальный объем рабочей жидкости (л)	25
Напряжение питающей сети (В)	220±10%
Частота питающей сети (Гц)	50




OOO НТЦ "Петролазер" www.petrolaser.ru Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

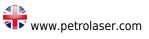

пробирок каждый	Вместимость		4 штатива по 50 пробирок каждый
-----------------	-------------	--	------------------------------------

Настройка режимов работы бани «СИНУС 03»