

OOO НТЦ "Петролазер" www.petrolaser.ru


Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.r YouTube

Email: laser@petrolaser.ru

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

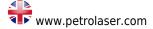

Компрессорий МИС-7П



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез



Описание

Компрессорий МИС-7П — предназначен для расплющивания образцов мяса при исследовании его проб на наличие трихинелл компрессорным методом с помощью трихинеллоскопа. В пронумерованные прямоугольники размещаются исследуемые пробы мяса. Для расплющивания мяса, которое исследуется, прижимается верхняя пластина при помощи барашковых гаек. Очень удобен в использовании на комбинатах, выездных экспертизах и так далее. Возможно использование вместе с трихинеллоскопами, а также с некоторыми видами лабораторных микроскопов. Проведение анализа мяса на наличие паразитарных форм организмов имеет огромное значение, так как они (трихинеллы, гельминты и т.д.) могут нанести существенный ущерб здоровью человека.

Компрессорий МИС-7П поставляется в комплекте:




OOO НТЦ "Петролазер" www.petrolaser.ru Многоканальный телефон: +7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ: 8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная, д. 42

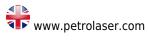

- Стейк-О 1 шт.
- Стейк-M 2 шт.
- <u>Стейк</u> 2 шт.
- <u>Стейк 2</u> 2 шт.
- Стейк V вар. 3 2 шт.
- <u>Стейк-Про</u> 2 шт.

Характеристики

Габаритные размеры, мм	220*50*26
Размер ячейки, мм	13*11
Толщина каждой пластины, мм	6
Наибольшее количество проб, помещаемое в компрессорий, шт.	28
Масса, кг не более	0,350